

Tools Required:

- No tools Necessary

Herramientas Necesarias:

- No se necesitan herramientas


Outils Nécessaires:

- Aucun outil requis

Step 1: Raise toilet seat and lid.

1er paso: Levante la tapa y el asiento del inodoro.

Etape 1: Soulevez le siège et le couvercle de la toilette.

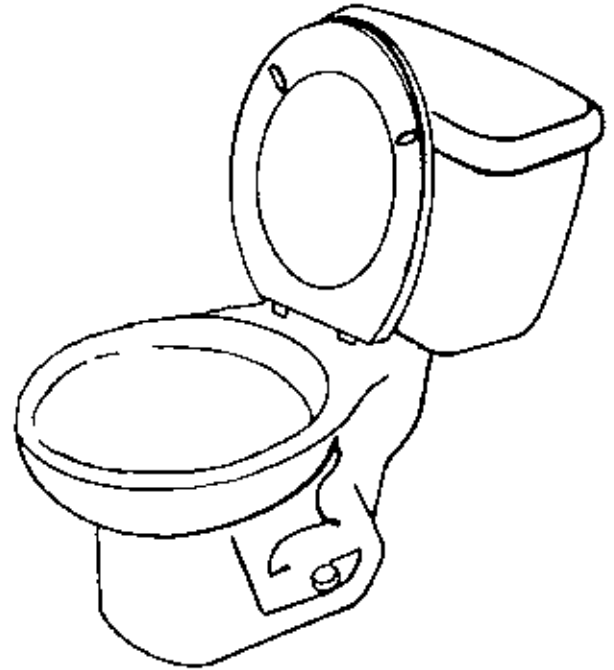

Step 2: Place elevated toilet seat directly on rim of toilet bowl.

2er paso: Coloque el asiento elevado directamente sobre el borde del inodoro

Etape 2: Placez le siège surélevé juste au-dessus de la cuvette.

**Cleaning instructions:**

Use regular household cleaners, rinse in tub then air dry before re-use

Instrucciones para la limpieza:

Utilice limpiadores caseros comunes, enjuague en la bañera y deje secar antes de usar nuevamente

Directives d'entretien:

Utilisez des produits nettoyants standard, rincez dans la baignoire et séchez à l'air libre avant de réutiliser

Art Date 6/00

FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE WITH INSTALLATION, CONTACT CSI AT 1-800-882-0116.

SI TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA PARA REALIZAR LA INSTALACION, CONTACTESE CON CSI, AL 1-800-882-0116.

POUR TOUTE QUESTION OU DE L'AIDE AVEC L'INSTALLATION, CONTACTEZ CSI AU 1-800-882-0116.

Home Care is a registered trademark of Home Care Tim-BR-MART, licensed to Moen Incorporated. / Home Care es una marca registrada de Home Care Tim-BR-MART, cuyo uso fue autorizado a Moen Incorporated. / Home Care est une marque déposée de Home Care Tim-BR-Mart et Moen incorporée en est un utilisateur autorisé.

www.homecare.moen.com



INNOVATIVE DESIGNS
for independent living™

Assembly Instructions

Specifications: Raises seat 5" om frpmt. 6" in back

Instrucciones para el ensamblado

Especificaciones: Eleva el asiento de inodoro 5" (127mm) al frente y 6" (152mm) en la parte trasera

Directives d'assemblage


Caractéristiques techniques: Souève le siège de 5 po (127mm) à l'avant et de 6 po (152mm) 'a l'arriére

DN7020

Toilet Safety Seat

Barandilla de seguridad para inodoro

Siège de toilette de sécurité

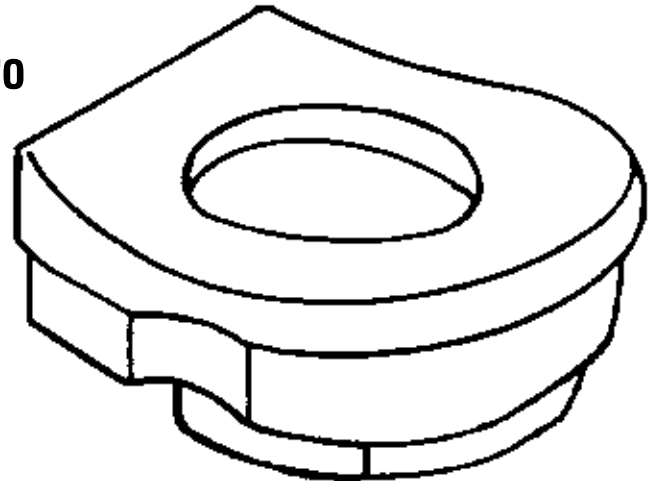

Dimensions:

15.5" long x 15" wide x 7.75" hing (back)

Dimensions::

15.5" (390mm) de large x 15" (375mm) acncho x 7.75" (495mm) de alto (parte trasera)

Dimensions::

15,5 po (390mm) de long x 15 po (375mm) de large x 7,75 po (495mm) de haut (`a l'arriére)

WARNING

This product has a maximum user weight of 250lbs. Do not jump or stand on this seat. Contact CSI immediately at 1-800-882-0116 if any components are damaged or missing. Making substitutions or modifying this product in any way will void your warranty. CSI assumes no liability for any damage or injury caused by improper assembly, installation or use of this product.

ADVERTENCIA

Este product soporta un peso máximo de 250 libra (113 kg). No salte o se pare sobre el asiento. Llame al servicio de atención al cliente de CSI al 1-800-882-0116 inmediatamente si cualquiera de los componentes está dañado o falta. El hacer sustituciones o modificar este producto en cualquier forma anulará su garantía. CSI no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causada por ensamblado, instalación o uso inadecuados de este producto.

AVERTISSEMENT

Ce produit convient aux personnes d'un poids maximal de 250lb (113kg). Ne sautez pas et ne vous tenez pas debout sur le siège. Communiquer immédiatement avec le service à la clientèle CSI au 1-800-882-0116 si l'une ou l'autre des parties de ce siège est manquante ou défectueuse. Tout remplacement et toute modification d'une partie de ce siège et ce, de quelque façon que ce soit, entraîne l'annulation de la garantie. CSI n'assume aucune responsabilité à l'égard des dommages ou des blessures découlant de l'assemblage inadéquat ou encore, de l'installation ou de l'utilisaton non appropriées de ce produit.